



«ДОКТОР СУСТАВОВ ПРОФИ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ



ПРОИЗВОДСТВО И РАЗРАБОТКА
ООО «ВИТАЛ РАЙС» VITAL RAYS, LLC
350012 УЛ. КРУГОВАЯ, 26, КРАСНОДАР
350012, KRUGOVAYA STR. 26, KRASNODAR, RUSSIA
Изготовлено в "ZMC HEALTHCARE TECHNOLOGY CO., LIMITED"
Rm 20A-BU FU COMM BLDG 300 LOCKHART RD
WAN CHAI HONG KONG

ERC



«ДОКТОР СУСТАВОВ ПРОФИ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ

ИНСТРУКЦИЯ

ZMC-120-2-1



ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ «ВИТАЛ РАЙЗ». ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ ПО БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО АППАРАТА «ДОКТОР СУСТАВОВ ПРОФИ».

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АППАРАТА:

- ❶ ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЕГО ИЗ РОЗЕТКИ.
- ❶ НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ВИАКЕ СЕТЕВОГО ШНУРА ВЛАЖНЫМИ РУКАМИ.
- ❶ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ ВО ВРЕМЯ СНА (СУЩЕСТВУЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГА).
- ❶ ПРИ НАЛИЧИИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ.
- ❶ НЕ ПРОВОДИТЕ ПРОЦЕДУРУ НА ОБНАЖЕННЫХ УЧАСТКАХ ТЕЛА: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВХОДЯЩУЮ В КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНУЮ ТКАНЕВУЮ ПОДКЛАДКУ ИЛИ НАДЕВАЙТЕ АППАРАТ ПОВЕРХ ТОНКОГО НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ (ТЕМПЕРАТУРА СВЫШЕ 60°C МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОЖОГ).
- ❶ ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ВКЛЮЧЕННОГО АППАРАТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРОВОДАМИ, ПЛАСТИКОМ ИЛИ ДРУГИМИ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ МАТЕРИАЛАМИ.
- ❶ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АППАРАТ НА ТЕХ УЧАСТКАХ ТЕЛА, ГДЕ ИМЕЮТСЯ ОТКРЫТЫЕ РАНЫ, ССАДИНЫ ИЛИ ДРУГИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИЛ:

- ❷ НЕ ВОЗДЕЙСТВУЙТЕ НА АППАРАТ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.
- ❷ НЕ БРОСАЙТЕ И НЕ УДАРЯЙТЕ АППАРАТ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЕГО ПОЛОМКЕ.
- ❷ НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АППАРАТОМ В САУНЕ ИЛИ В ВАННОЙ.
- ❷ НЕ МОЙТЕ АППАРАТ ВОДОЙ. ДЛЯ ЕГО ОЧИСТКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СУХУЮ ТКАНЬ.
- ❷ НЕ РАЗБИРАЙТЕ ПРИБОР И НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ ЕГО ЧАСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО (В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПРИ ЕГО ПОЛОМКЕ ВАМ БУДЕТ ОТКАЗАНО В СЕРВИЗНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ).
- ❷ НЕ ПЕРЕГИБАЙТЕ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ И НЕ СТАВЬТЕ НА НЕГО ТЯЖЕЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ.





«ДОКТОР СУСТАВОВ ПРОФИ»
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ

ОПИСАНИЕ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ «ДОКТОР СУСТАВОВ ПРОФИ» ОТ КОМПАНИИ «ВИТАЛ РАЙЗ» ОБЛАДАЕТ ДВУМЯ ЛЕЧЕБНЫМИ ФУНКЦИЯМИ: ПРОГРЕВОМ ДЛИННОВОЛНОВЫМ ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И ВИБРАЦИОННЫМ МАССАЖЕМ.

ТЕПЛОВЫЕ КАТОДЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ СЕРЕБРА ВЫСОЧАЙШЕЙ ПРОБЫ С ВЫСОКОЙ ТЕПЛОВОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ, СПОСОБНЫ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ПРОПУСКАТЬ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В КОЛЕНО/ПЛЕЧО/ЛОКОТЬ, А ТАКЖЕ АКТИВИРОВАТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И АНТИБИОТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СПОСОБСТВУЮТ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ АППАРАТА.

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ, ОСНАЩЕННЫЙ БЛОКОМ ПАМЯТИ ТЕМПЕРАТУРЫ, ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНЯТЬ ЕЕ В ИНТЕРВАЛЕ ОТ 45 ДО 65°C ИЛИ ПОДДЕРЖИВАТЬ НА УРОВНЕ, УСТРАИВАЮЩЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АППАРАТА НА ОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ УСТРОЙСТВО ЗАПОМИНАЕТ ЕЕ И УСТАНАВЛИВАЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПРОЦЕДУРАХ.

«ДОКТОР СУСТАВОВ ПРОФИ»

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:



ВНЕШНЯЯ СТОРОНА



ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА




«ДОКТОР СУСТАВОВ ПРОФИ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА:

1. НАДЕНЬТЕ ЗАЩИТНУЮ ТКАНЕВУЮ ПОДКЛАДКУ НА ПРОГРЕВАЕМУЮ ОБЛАСТЬ. ПРИСТЕГНИТЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ «ДОКТОР СУСТАВОВ ПРОФИ» ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ ВВЕРХ. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ФИКСИРУЮЩИЙ РЕМЕШОК ТАК, ЧТОБЫ ВАМ БЫЛО КОМФОРТНО.
2. ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР В СЕТЬ. НА ДИСПЛЕЕ ВЫСВЕТИТСЯ «--».
3. НАЖМИТЕ КНОПКУ «СТАРТ/СТОП» ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ АППАРАТА.
4. СРЕДНЯЯ И ПРАВАЯ КНОПКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. ПРИ КАЖДОМ НАЖАТИИ КНОПКИ ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕНЯЕТСЯ НА 5°C. ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АППАРАТА РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНОВИТЬ МИНИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ – 45 °С.
5. ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ФУНКЦИИ ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ КНОПКУ «ВИБРАЦИЯ» НА БОКОВОЙ СТОРОНЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.
6. ПРИБОР ОСНАЩЕН ВСТРОЕННЫМ АВТОТАЙМЕРОМ, КОТОРЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧИТ НАГРЕВАНИЕ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ РАБОТЫ. ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ ПРОЦЕДУРУ, НАЖМИТЕ КНОПКУ «СТАРТ/СТОП» ЕЩЕ РАЗ.
7. АППАРАТ ЗАПОМИНАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ, ПРИ КОТОРОЙ ОН БЫЛ ВЫКЛЮЧЕН, И ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ВКЛЮЧЕНИИ ВЫСТАВИТ ЕЕ ПО УМОЛЧАНИЮ.
8. ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ НАЖМИТЕ КНОПКУ «СТАРТ/СТОП». ОТКЛЮЧИТЕ ФУНКЦИЮ ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА, ЕСЛИ ОНА БЫЛА ВКЛЮЧЕНА. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИБОР ОТКЛЮЧЕН И ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО ИЗ СЕТИ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

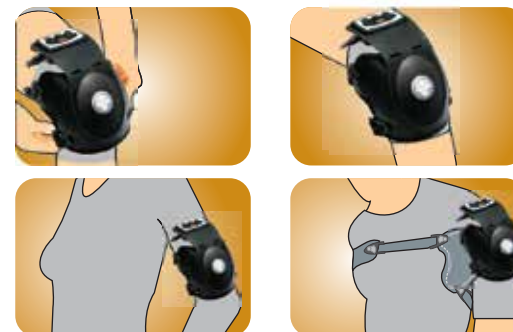

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- СУСТАВНЫЕ БОЛИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ ХОДЬБЫ, ПОДЪЕМА ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЫПОЛНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ.
- СУСТАВНЫЕ БОЛИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОГОДЫ ИЛИ РЕЗКИМ ПЕРЕПАДОМ ТЕМПЕРАТУР.
- ЧАСТОЕ ОЩУЩЕНИЕ ДИСКОМФОРТА В СУСТАВЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ГИБКОСТИ. ОТЕЧНОСТЬ ИЛИ ОНЕМЕНИЕ СУСТАВОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ ИЛИ НОЧЬЮ. КОЖИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ «ДОКТОР СУСТАВОВ ПРОФИ» ПЕРЕД ЗАРЯДКОЙ ИЛИ ПРОГУЛКОЙ. ЭТО ПОМОЖЕТ СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ В МЫШЦАХ, УВЕЛИЧИТЬ ПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВОВ В КОЛЕНЕ/ПЛЕЧЕ/ЛОКТЕ И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛЕЗНЕННЫХ ОЩУЩЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ДВИЖЕНИИ.
2. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ ЕЖЕДНЕВНО ПО 30 МИНУТ 2-3 РАЗА В ДЕНЬ. СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНОЙ. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.
3. РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МОЖЕТ СНИЗИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. УВЕЛИЧИВАЙТЕ ИЛИ УМЕНЬШАЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ПОСТЕПЕННО.
4. ПО МЕРЕ СНЯТИЯ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОПОЛНЯТЬ ПРОЦЕДУРУ С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ АППАРАТОМ «ДОКТОР СУСТАВОВ ПРОФИ» ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СУСТАВОВ.
5. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВХОДЯЩУЮ В КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНУЮ ТКАНЕВУЮ ПОДКЛАДКУ ИЛИ НАДЕВАЙТЕ АППАРАТ ПОВЕРХ ТОНКОГО НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ОЖОГ ИЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ.